

SAM
MEDICAL

SAM® Pelvic Sling II

**INFILA.
CLICCA.
FISSA.**

STABILIZZAZIONE CON TENSIONE OTTIMALE

La SAM® Pelvic Sling II è la prima e unica cintura pelvica circonferenziale, tensionabile, caratterizzata da una configurazione monopezzo con la capacità scientificamente dimostrata di ridurre e stabilizzare in modo sicuro ed efficace le fratture a libro aperto dell'anello pelvico.



TECNOLOGIA APPLICATA

FIBBIA AUTOSTOP

La fibbia AUTOSTOP SAM® brevettata si attiva automaticamente impedendo la tensione eccessiva o insufficiente della SAM® Pelvic Sling II. Ottenuta la compressione ottimale, due agganci si attivano a scatto confermando la corretta applicazione. La cintura è fissata in posizione con una fascetta di chiusura a strappo.



PROGETTATA PER SALVARE LA VITA

1 FASCIA POSTERIORE A BASSO ATTRITO

I materiali a basso attrito che ricoprono la fascia posteriore della cintura pelvica agevolano il trasferimento del paziente dopo gravi traumi.

2 FIBBIA AUTOSTOP SAM®

Clic tattili e udibili confermano l'applicazione corretta della cintura e impediscono una tensione eccessiva mantenendo al tempo stesso la compressione ottimale.

3 CINTURA DI PRECISIONE


I fori di alta precisione si bloccano con la fibbia AUTOSTOP, consentendo una rapida applicazione della cintura. La fascetta di chiusura a strappo fissa saldamente la cintura.

4 FORMA AFFUSOLATA

La parte anteriore stretta e affusolata agevola l'inserimento di cateteri urinari, la radiologia interventistica, la fissazione esterna e la chirurgia addominale, senza dover rimuovere la cintura.

5 MATERIALE RADIOTRASPARENTE

Tutti i materiali, eccetto le due molle in acciaio inossidabile sulla fibbia, sono radiotrasparenti. Ciò consente di eseguire radiografie e scansioni TC senza dover rimuovere la cintura.

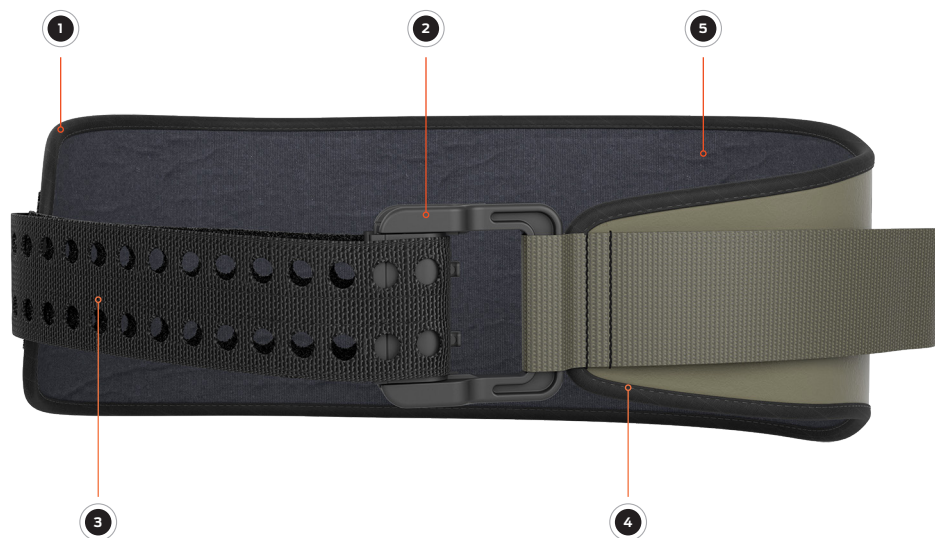

MODELLI



CIVILI
ARANCIONE/BLU



MILITARI
VERDE OLIVA/NERO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE*

Altezza: 14 cm (5,5 in)
Larghezza: 19 cm (7,5 in)
Spessore: 9,5 cm (3,75 in)
Peso: 244 - 250 g (8,6 - 9,2 oz)**

PRINCIPIO OPERATIVO

La tensione ottimale è raggiunta con una pressione circonferenziale di 150 N, che estende gli agganci dalla fibbia AUTOSTOP SAM® attraverso la cintura di precisione.

MODELLI DISPONIBILI

Militari
Standard 81-127 cm/32-50" (PS301-OD-EN)

Civili
Small 69-114 cm/27-45" (PS300-OB-EN)
Standard 81-127 cm/32-50" (PS301-OB-EN)
Large 91-137 cm/36-54" (PS302-OB-EN)

VENDITE GLOBALI

Numero verde U.S.A.: 800.818.4726
Numero U.S.A. locale: 503.639.5474
Numero fax U.S.A.: 503.639.5425
sammedical.com



Emergo Europe, Prinsessegracht 20,
2514 AP, L'Aia, Paesi Bassi



SAM Medical Products®
12200 SW Tualatin Rd., Ste 200
Tualatin, OR 97062 USA

* Le dimensioni e il peso variano secondo la configurazione e il processo di fabbricazione.

** Il peso varia secondo le misure (Small, Standard, Large)

SAM® è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.

©2019 SAM Medical Products. Tutti i diritti riservati.